



Auto Seal ya está aquí

EasyLife es tan extraordinaria que prácticamente se ajusta sola.

A veces está bien esperar resultados inmediatos. Por eso hemos desarrollado EasyLife con la revolucionaria tecnología Auto Seal.

Nosotros la llamamos EasyLife. Para usted es su mascarilla preferida a la hora de ajustarla. Con su tecnología patentada Auto Seal, la mascarilla nasal EasyLife elimina casi por completo la necesidad de realizar ajustes manuales. Su diseño ligero e innovador incorpora un exclusivo sistema de almohadilla doble: con la almohadilla interior se logra un sellado de ajuste automático instantáneo, mientras que la almohadilla exterior proporciona un soporte confortable. Los únicos pasos manuales necesarios son los intuitivos ajustes del arnés, por lo que su adaptación no podría ser más sencilla. Ayudarle a conseguir el ajuste en el 100% de sus pacientes el 100% de las veces es, sin duda, más fácil con EasyLife.

PHILIPS

RESPIRONICS


La almohadilla para la frente se ajusta automáticamente (lo que elimina el paso de ajuste tradicional) y requiere una fuerza mínima del arnés.



Sólo cuatro partes: armazón de la mascarilla, arnés, almohadilla de soporte exterior y almohadilla de sellado interior.

Gracias a los microorificios de exhalación en ángulo, el funcionamiento es más silencioso y el aire se desvía de la persona que duerme junto al paciente.

La almohadilla de soporte exterior permite que la mascarilla descansa de forma suave y cómoda sobre la cara del paciente, con lo que se elimina la necesidad de apretar en exceso el arnés.

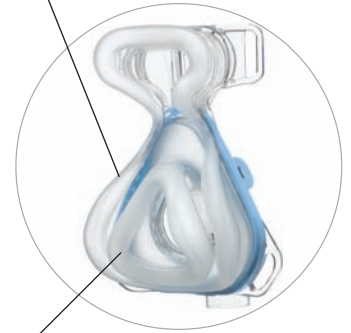

Con la almohadilla de sellado interior se logra un sellado de ajuste automático instantáneo.

Información para pedidos				
Mascarilla EasyLife	Pequeño	Mediano	Anchura mediana	Grande
Mascarilla con arnés	1050021	1050022	1050023	1050024
Mascarilla con arnés, sin orificio de exhalación	1050031	1050032	1050033	1050034
DuoPack (almohadilla adicional) con arnés	1050026	1050027	1050028	1050029
FitPack: mascarilla con arnés y almohadillas pequeña y mediana		1050088	N/D	N/D
FitPack: mascarilla con arnés y almohadillas de anchura mediana y grande	N/D	N/D		1050089
Partes de repuesto				Número de parte
Juego de almohadillas nasales pequeñas*				1050091
Juego de almohadillas nasales medianas*				1050092
Juego de almohadillas nasales de anchura mediana*				1050093
Juego de almohadillas nasales grandes*				1050094
Arnés EasyLife				1050095
Medidor de tamaño EasyLife				1050096

* En un juego de almohadillas se incluyen una almohadilla de sellado interior y una almohadilla de soporte exterior.

Respironics, AutoSeal, DuoPack, EasyLife y FitPack son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy KB 11/20/09 MCI 4102979 PN 1069143

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Respironics Asia Pacifico
+65 6298 1088

Respironics Europa, Oriente Medio, África
+33 1 47 52 30 00

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics